

PC DOKTOR 

Physician Information System

PC DENT 

Dentist Information System



Reinstalace programu PC DOKTOR/PC DENT, přenesení na nový PC

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

1) Reinstalace lokálního počítače	3
2) Reinstalace síťového klienta	4
3) Reinstalace serveru	5
4) Nastavení dedikovaného serveru	6
4.1 Nastavení dedikovaného serveru	6
4.2 Nastavení centrální aktualizace	8
4.3 Firewall	8
4.4 Nastavení zálohování pomocí scriptu	8
5) Obsahy jednotlivých databází	11
6) Nastavení výjimek antiviru a firewallu	12
7) Přenesení certifikátu na nový počítač	16
8) O příručce	16

Reinstalace programu

Před tím, než provedeme reinstalaci programu, ověřte, zda je program nainstalován na samostatném (lokálním) počítači nebo zdali je zapojen v počítačové síti. Pokud se jedná o síťovou instalaci, ověřte, jestli pracuje jako klient a-nebo server (hlavní počítač), ke kterému se ostatní počítače připojují. Podle zjištěného typu instalace vyberte jeden z následujících postupů:

V případě, že používáte službu MEDICAL NET kontaktujte nejdříve servisní oddělení na telefonu 246 007 844! K nové instalaci programu použijte pouze plnou verzi programu z webových stránek!

- Aktuální verze programu [ZDE](#).
- www.cgmsvet.cz

1) Reinstalace lokálního počítače

a) Ze starého (původního) počítače si ze složky DIALOG MIS, která je obvykle umístěna C:\Program Files\ nebo C:\Program Files (x86)\Dialog MIS u 64bit. OS, uschováme následující soubory:

- DATA.M, DATA.MBJ
- KATALOGY.M, KATALOGY.MBJ
- PRACOVNI.M, PRACOVNI.MBJ
- PICTURE.M, PICTURE.MBJ
- PICARCH.M, PICARCH.MBJ
- ecommunication.db3 -> pouze pokud používáte modul eDávky
- emessage.db3 -> pouze pokud používáte modul CGMesky
- V případě, že používáte knihu objednávek, eNeshopenku, eTržby, eDávky nebo CGMesky uschovejte také záložní soubor cgmbackup_Zal.7Z_, který vytvoříte přes okno archivace nebo pomocí zálohovacího skriptu.
- V případě, že používáte eParafu nebo Grafický modul (obrázky, ukládání příloh do karty, skenování), uschovejte také záložní soubor eRepository_Zal.ZIP, který vytvoříte přes okno archivace nebo pomocí zálohovacího skriptu.
- V případě používání vlastních tiskopisů, je nutné zálohovat i jejich lokálně uložená pozadí.
- V případě, že používáte modul eParafa s nastaveným ukládáním na vlastní uložení, nezapomeňte také zálohovat složku se skladem podepsaných dokumentů.
- Pokud jste uživatelem **Grafického modulu** a pokud jste v průběhu jeho používání odehrávaly grafické záznamy, kvůli zmenšení velikosti hlavní obrázkové databáze, je nutné zálohovat i soubory PICJNL.M a PICJNL.MBJ, které toto odehrání obsahují. Můžete je vypálit na CD, DVD, nahrát na FLASH DISK nebo zkopírovat po síti na jiné PC. Pokud jste pořizovali videonahrávky pomocí grabovacího softwaru, je nutné zkopírovat a zálohovat i tyto soubory.
- Pokud používáte **eRecept** či modul **eDávky, eKontrol, eParafa, eNeshopenka nebo eTržby** nezapomeňte přenést na nový PC certifikáty. Postup popisuje kapitola [Přenesení](#)

certifikátu na nový počítač¹⁶.

b) Do nového počítače nejprve nainstalujte plnou verzi programu, která je ke stažení zde:

- **PC DOKTOR**
- Více informací na www.cgmsvet.cz

Po instalaci, ještě před spuštěním programu, nakopírujte uschované soubory do složky C:\Program Files\Dialog MIS nebo C:\Program Files (x86)\Dialog MIS u 64bit. OS. Po spuštění programu provedete přes menu **Služby > Archivace systému > Obnovení > [Výběr Archivu]** obnovení souboru **cgmbackup_Zal.7Z_** a obnovení **eRepository_Zal.ZIP**.

c) Posledním krokem je opětovné nastavení archivačních profilů, které se z původního počítače nepřenesou. Jejich nastavení provedete přímo v nabídce **Archivace databáze**, která je v menu **Služby**.

2) Reinstalace síťového klienta

a) Než začnete, zjistěte si jméno serveru, popř. jeho IP adresu (např. 192.168.1.0).

b) Z původního počítače si zkopírujte soubory **PRACOVNI.M**, **PRACOVNI.MBJ** např. na FLASH DISK (ostatní data jsou uložena v souborech na serveru, proto je nemusíte z původního klienta přenášet).

c) Po spuštění instalace se na okně **Výběr varianty produktu** nabízí volba **Instalace klienta (stanice) PC DOKTOR / PC DENT**, kterou vyberte. V zobrazené nabídce pak vyberte volbu **Instalovat síť** a zaklikněte možnost **Klient**. Do políčka **Jméno serveru** napište IP adresu nebo jméno serveru (hlavního počítače). Stiskem tlačítka **[Další]** pokračujte v instalaci programu.

d) Po instalaci programu ještě před spuštěním nakopírujte uschované soubory **PRACOVNI.M**, **PRACOVNI.MBJ** do složky Dialog MIS, která je standardně umístěna C:\Program Files\Dialog MIS nebo C:\Program Files (x86)\Dialog MIS u 64bit. OS.

e) Pokud používáte **eRecept** či modul **eDávky**, **eKontrol**, **eParafa**, **eNeschopenka** nebo **eTržby** nezapomeňte přenést na nový PC certifikáty. Postup popisuje kapitola Přenesení certifikátu na nový počítač¹⁶.

3) Reinstalace serveru

- a) Při instalaci serveru doporučujeme použít u nového počítače stejné síťové jméno a IP adresu, jako měl počítač původní (původní počítač je nutné přejmenovat a dát mu novou IP adresu, nebo jej ze sítě odpojit). Instalace tak bude jednodušší.
- b) Ze starého (původního) počítače si ze složky DIALOG MIS, která je obvykle umístěna C:\Program Files\ nebo C:\Program Files (x86)\Dialog MIS u 64bit. OS., uschováme následující soubory:
- **DATA.M, DATA.MBJ,**
 - **KATALOGY.M, KATALOGY.MBJ**
 - **PRACOVNI.M, PRACOVNI.MBJ,**
 - **PICTURE.M, PICTURE.MBJ,**
 - **PICARCH.M, PICARCH.MBJ**
 - **ecomunication.db3 -> pouze pokud používáte modul eDávky**
 - **emessage.db3 -> pouze pokud používáte modul CGMesky**
 - V případě, že používáte **Knihu objednávek, eNeshopenku** nebo **eTržby**, uschovejte záložní soubor **cgmbackup_Zal.7Z_**, který vytvoříte přes okno archivace nebo pomocí zálohovacího skriptu.
 - V případě, že používáte **eParafu** nebo **Grafický modul** (obrázky, ukládání příloh do karty, skenování), uschovejte také záložní soubor **eRepository_Zal.ZIP**, který vytvoříte přes okno archivace nebo pomocí zálohovacího skriptu.
 - Při použití vlastních tiskopisů, je nutné zálohovat i jejich lokálně uložená pozadí.
 - V případě, že používáte modul **eParafa** s nastaveným ukládáním na vlastní uložení, nezapomeňte zálohovat složku se skladem podepsaných dokumentů.
 - Pokud jste uživatelem **grafického modulu** a pokud jste v průběhu jeho používání odehrávaly grafické záznamy kvůli zmenšení velikosti hlavní obrázkové databáze, je nutné zálohovat i soubory **PICJNL.M** a **PICJNL.MBJ**, které toto odehrání obsahují. Můžete je vypálit na CD, DVD, nahrát na FLASH DISK nebo zkopírovat po síti na jiné PC.
 - Pokud používáte **eRecept** či modul **eDávky, eKontrol, eParafa, eNeschopenka** nebo **eTržby** nezapomeňte přenést na nový PC certifikáty. Postup popisuje kapitola [Přenesení certifikátu na nový počítač](#)¹⁶.
- c) Do nového počítače nejprve nainstalujte plnou verzi programu, která je ke stažení zde:
- [PC DOKTOR](#)
 - Více informací na www.cgmsvet.cz
- d) Po spuštění instalace se na okně **Výběr varianty produktu** nabízí volba **Instalace serveru PC DOKTOR / PC DENT**, kterou zatrhněte. V zobrazené nabídce pak vyberte možnost **Instalovat síť** a zakliněte **Server**. Stiskem tlačítka **[Další]** pokračujte v instalaci programu.

- e) Před spuštěním programu nakopírujte uschované soubory do složky Dialog MIS (C:\Program Files) nebo C:\Program Files (x86)\Dialog MIS u 64bit. OS a spusťte program. Po spuštění programu proveďte přes menu **Služby > Archivace systému > Obnovení > [Výběr Archivu]** obnovení souboru **cgmbbackup_Zal.7Z_** a obnovení **eRepository_Zal.ZIP**.
- f) Je-li nutné změnit jméno nebo IP adresu serveru, musíte toto nastavení upravit také na všech připojených klientech. Nejsnazší způsob je provést aktualizaci postupně na každém klientovi. Při instalaci zvolte možnost **Pro pokročilé**, zatrhněte **Instalovat síť** a zvolte **Klient** a hned vedle napište nové jméno nebo IP adresu serveru a stiskem tlačítka **[Další]** pokračujte v instalaci programu.
- g) Po spuštění programu na serveru nastavte znovu archivační profily v menu **Služby > Archivace databáze**.
- h) V případě, že byl používán režim centrální aktualizace, je nutné jej opětovně nastavit v menu **Služby > Implementace systému > Implementace systému**, zvolte záložku **/Aktualizace SW/** a zatrhněte volbu **[x] Centrální aktualizace systému**. Po nastavení musíte provést vystavení aktualizace z programu přes menu **Obecné > WWW strany > Aktualizace PC DOKTOR > Stažení verze z WWW a její vystavení**.
- i) V případě, že se jedná o dedikovaný server, použijte návod pro nastavení dedikovaného serveru.
- j) Aby aplikace PC DOKTOR®, PC DENT® byla přístupná za použití firewallu, je nutné povolit následující výjimky. Port: **TCP-135**, výjimka pro aplikaci **C:\Program Files\Dialog MIS\doktorproxy.exe**. U některých typů firewallů je zapotřebí povolit služby **RPC** (Remote procedure call).
- k) V nastavení Vašeho síťového adaptéru důrazně doporučujeme vypnout tuto volbu:
pravý klik na zástupce **Počítač > Spravovat > Správce zařízení > Síťové adaptéry > pravý klik na adaptér > Vlastnosti > /Řízení spotřeby/ > [x] Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie**

4) Nastavení dedikovaného serveru

Provoz dedikovaného serveru umožňuje provoz aplikace PC DOKTOR bez nutnosti přihlášení do OS Windows. V tomto režimu je zároveň předpokládána automatizace zálohovacího procesu.


Tato dokumentace je určena pro uživatele zvládající pokročilé funkce operačních systémů Windows. V případě nejasností svěťte instalaci servisnímu technikovi nebo zástupci firmy CompuGroup Medical.

4.1 Nastavení dedikovaného serveru


Aplikaci instalujte běžným způsobem jako server. Popis instalace naleznete v návodu pro instalaci serveru. Po nainstalování programu je třeba nastavit uživatele, přes kterého se bude serverová

aplikace spouštět.

1. Na PC vyberte uživatele, přes kterého se bude serverová aplikace spouštět, případně založte nového. Je důležité, aby tento uživatel měl stálé heslo.
 - a. Potřebná nastavení provedete ve funkci Windows **Ovládací panely > Uživatelské účty**.
 - b. Daný uživatel nemusí mít administrátorská práva.
2. Následně přejděte do nastavení služby **DoktorProxy.exe**
 - a. pro 64bit OS - **Start > Spustit > MMC comexp.msc /32 > Služba komponent > Počítače > Tento počítač > Konfigurace modelu DCOM**
 - b. pro 32bit OS - **Start > Spustit > dcomcnfg > Služba komponent > Počítače > Tento počítač > Konfigurace modelu DCOM**

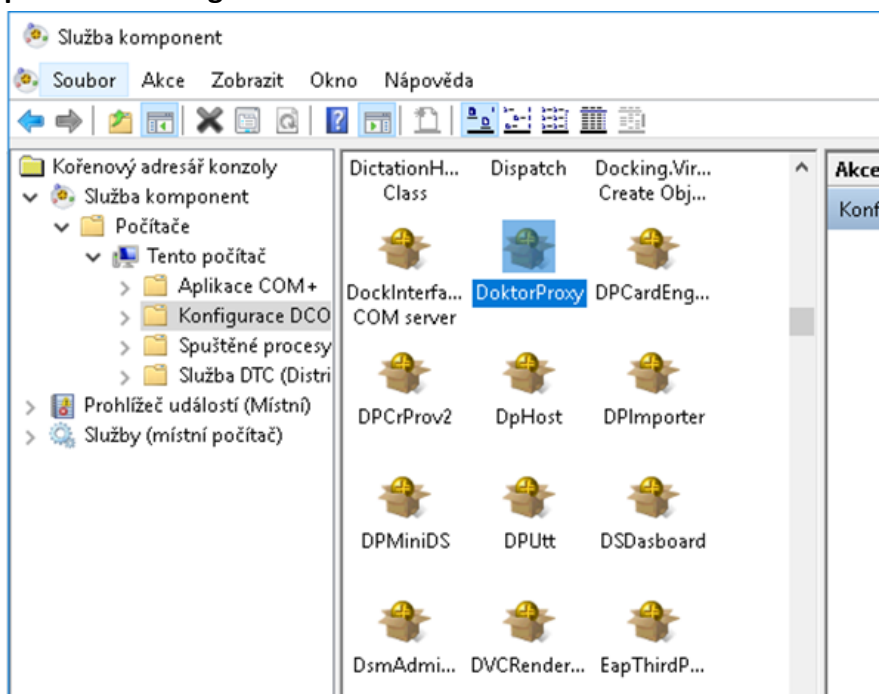

3. Klikněte pravým tlačítkem na **DoktorProxy** a zvolte **Vlastnosti**.
4. Na záložce **/Identita/** zvolte **(o)Tento uživatel** a zadejte uživatele a heslo, kterého jste zvolili/vytvořili v předchozím bodu. V konfiguraci DCOM je tak nastaven uživatel, přes kterého se bude serverová aplikace spouštět. Nyní na serveru nemusí být pro chod aplikace přihlášen žádný uživatel.

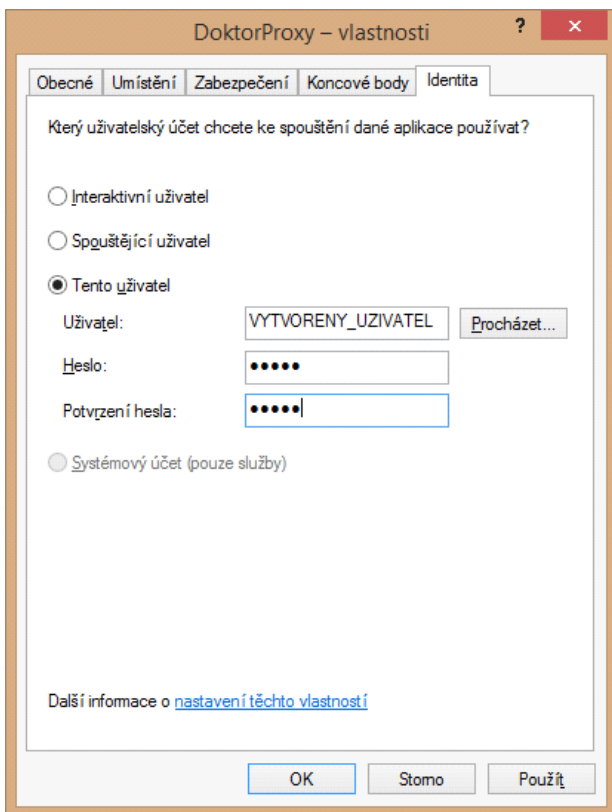

4.2 Nastavení centrální aktualizace

Pro správnou funkci je třeba povolit sdílení souborů bez hesla. Klientské počítače musí mít přístup do složky DialogUp na serveru bez nutnosti zadávání hesla. Dále povolte centrální aktualizaci programu v menu **Služby > Implementace systému > Implementace systému** na záložce / **Aktualizace SW/** zatržením položky **[x] Centrální aktualizace systému PCDOKTOR**.

Podrobný postup naleznete v návodu **Centrální aktualizace**.

4.3 Firewall

Při přechodu na síťovou verzi doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost nastavení firewallu a antiviru.

K nastavení brány Windows Firewall dochází automaticky v průběhu instalace. Pokud máte počítače vybaveny ještě dodatečným firewallem, je zapotřebí do něj přidat výjimku na aplikaci C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\doktorproxy.exe a u některých firewallů také službu **RPC** (Remote procedure call). Je nutné povolit také port **TCP 135**.

Podrobné informace o nastavení výjimek pro antivir a firewall naleznete v kapitole **Pravidla pro nastavení firewallu/antiviru**.


4.4 Nastavení zálohování pomocí scriptu

Pro zálohování na dedikovaném serveru je nutné využívat zálohování pomocí skriptu. Soubor **Zálohovací skript (backup_dcom.zip)** je možné stáhnout z portálu www.cgmsvet.cz. Soubor

rozbalte do složky Dialog MIS. Možnosti nastavení naleznete při editaci souboru. V případě 64bit OS je nutné script spouštět přes zástupce 32bit verze. Ten se nachází ve složce C:\windows\SysWOW64\cscript.exe.

Automatická záloha

- Pro automatickou zálohu je zapotřebí naplánovat úlohu do **Plánovače úloh** Windows. **Plánovač úloh** naleznete přes nabídku **Ovládací panely > Nástroje pro správu**, nebo **Start > Spustit > compmgmt.msc** a dále **Správa počítače (místní) > Systémové nástroje > Plánovač úloh**. Pro nastavení nové úlohy zvolte menu **Akce > Vytvořit úlohu**.

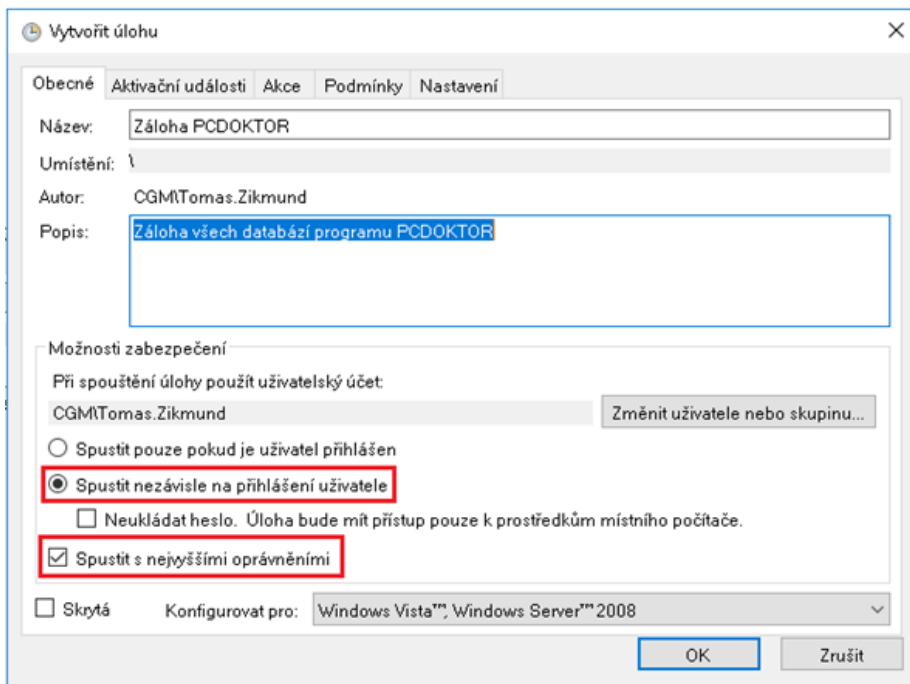


- Na záložce **/Obecné/** zvolte název úlohy a dále nastavení uživatelského účtu ve Windows, pod kterým se úloha bude spouštět. V každém případě je nutné zvolit **[x] Spustit s nejvyššími oprávněními** a pro zajištění bezproblémového chodu i **(o) Spustit nezávisle na přihlášení uživatele**.
- Na záložce **/Aktivační událost/** nastavíte dobu, kdy se bude archivace provádět. Každá aktivační událost obsahuje nastavení, která určují kritéria jejího spuštění. Pro libovolnou aktivační událost lze nastavit další upřesňující možnosti. Pro nastavení nové aktivační události stiskněte **[Nová]**.

Jestliže vyberete přepínač **(o) Denně**, zvolte pro tuto úlohu interval opakování a datum a čas, kdy bude úloha spuštěna poprvé. Při hodnotě intervalu **1** je úloha spouštěna denně a při hodnotě intervalu **2** je spouštěna každý druhý den. Úloha bude spouštěna v zadanou hodinu tohoto dne. Při použití tohoto nastavení se záloha bude provádět každý den ve 23:00. V případě volby individuálního nastavení doporučujeme použít **Nápovědu**, kterou zobrazíte stiskem klávesy **>>F1**. Zde naleznete podrobný popis možností nastavení aktivačních událostí.

Aktivace	Podrobnosti	Stav
Denně	V 23:00 každý den	Povoleno

- V záložce **/Akce/** provedete nastavení prováděného příkazu, v našem případě zálohovacího skriptu. Typ akce nastavte na **Spustit program**.
 - V případě **32b. verze operačního systému** do pole **Program** či **skript** vložte cestu k již překopírovanému (do složky Dialog MIS) a nastavenému skriptu **backup_dcom.vbs**. Včetně skriptu, tedy: C:\Program Files\Dialog MIS\backup_dcom.vbs.
 - V případě **64b. verze operačního systému** do pole **Program** či **skript** vložte cestu k souboru **cscript.exe**, který je standardně součástí Windows. Cesta k souboru je tedy C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe. V druhém kroku je nutné nastavit spuštění zálohovacího skriptu, což provedete nastavením argumentu (parametru). Do pole **Přidat argumenty** vložte cestu k již překopírovanému (do složky Dialog MIS) a nastavenému skriptu **backup_dcom.vbs**. Včetně skriptu, tedy: "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\backup_dcom.vbs". **Pozor ! Argument musí být v uvozovkách**. Stiskem tlačítka **[OK]** dokončíte nastavení události spouštějící zálohování.

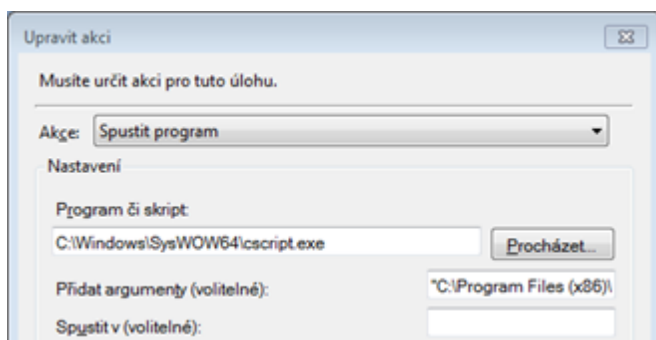

- V tuto chvíli je provedeno standardní nastavení. Záložky **/Podmínky/** a **/Nastavení/** obsahují další možnosti individuálního nastavení spouštění úlohy, primárně je zvoleno nastavení, které zajistí správný chod zálohování. V případě nutnosti specifického nastavení úlohy doporučujeme konzultaci s IT odborníkem.

Pro jednoduchý test, zda je nastavení zálohování provedeno správně, doporučujeme spustit úlohu manuálně. To provedete stiskem pravého tlačítka myši na požadovanou úlohu v **Přehledu naplánovaných úloh** a výběrem **Spustit**. Poté provedete jednoduchou kontrolu, zda nastavená složka pro zálohování obsahuje požadované archivy. I v případě úspěšné zálohy, doporučujeme občasnou kontrolu složky, na výskyt archivních souborů.

Zástupce pro ruční spuštění zálohy

V některých případech je zapotřebí jednoduše spustit proces zálohy ručně, mimo naplánovanou úlohu. Pro tyto případy je vhodné si na ploše vytvořit spustitelného zástupce, který aktivuje zálohovací skript a provede archivaci dle nastavených parametrů.

- Klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru na ploše a vyberte **Nový > Zástupce**.
- V případě **32b. verze operačního systému** do pole **Zadejte umístění položky** vložte cestu ke skriptu **backup_dcom.vbs**. Včetně skriptu, tedy: C:\Program Files\Dialog MIS\backup_dcom.vbs, popřípadě vyberte cestu k souboru pomocí tlačítka **[Procházet]**. Stiskněte **[Další]**, zadejte název zástupce, například "ZálohaPCDOKTOR" a následně **[Dokončit]**.
- V případě **64b. verze operačního systému** do pole **Zadejte umístění položky** vložte cestu k souboru **cmd.exe**. Cesta k souboru je C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe, popřípadě vyberte cestu k souboru pomocí tlačítka **[Procházet]**. Nyní je nutné jako parametr k tomuto souboru přidat zálohovací skript, to provedete vložením za mezeru cesty ke skriptu **backup_dcom.vbs**. Včetně skriptu, tedy: "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\backup_dcom.vbs". Celý řádek pak vypadá následovně: C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\backup_dcom.vbs"
 - **Pozor !: Parametr musí být v uvozovkách.**
 - Stiskněte **[Další]**, zadejte název zástupce, například "ZálohaPCDOKTOR" a následně **[Dokončit]**.

5) Obsahy jednotlivých databází

- | | |
|-----------------|---|
| DATA | - všichni pacienti, pracoviště, zaměstnanci, vlastní formuláře, dávky |
| KATALOGY | - číselníky výkonů, léků, privátní, stomatologických výrobků |
| PRACOVNI | - nastavení tisků, formulářů, lokální nastavení stanice |

PICTURE	- obrázky
PICARCH	- zarchivované obrázky
TEMPLATE	- distribuční databáze (není třeba zálohovat)
ecomcommunication.db3	- uzávěrky a faktury vytvořené modulem eDávky
emessage.db3	- protokoly odeslaných SMS zpráv modulu CGMesky
cgmbackup_Zal.7Z_	- Kniha objednávek, eNeschopenky a eTržby
eRepository_Zal.ZIP	- dle nastavení sklad el. podepsaným dokumentů eParafou, obrázky grafického modulu, přiložené soubory do karty, naskenované dokumenty

6) Nastavení výjimek antiviru a firewallu

Výjimky pro antivir a firewall pro aplikaci **PC DOKTOR® / PC DENT®** v síťovém režimu DCOM.

Tento návod popisuje veškerou možnou komunikaci programu, a proto je nutné vzít v potaz zda-li některý z vašich bezpečnostních programů komunikaci neblokuje.

Obecně platí, že pro správné fungování síťové komunikace **nesmí** Váš bezpečnostní software **blokovat**:

- na serveru přichází **TCP** komunikaci **na portu 135**
- komunikaci aplikace **doktorsrv.exe, doktorproxy.exe**

V případě že je blokována síťová komunikace, můžete se setkat na klientských PC s chybou **Server RPC není k dispozici**.

- přístup k celé doméně (internetové aktualizace) -> nutné nastavit výjimku ->
- **filesrv.compugroup.cz*** (nejlépe na ***.compugroup.cz***)
- [www.dialogmis.cz*](http://www.dialogmis.cz)

Porty

135, 443 a 12343

Nutné povolit komunikaci na **portech**

- pro IIS (standartně 80)
- CGM server - 12343
- 443
- 1972

Nastavení výjimek na programy je nutné provést v případě, že dochází k problémům komunikace aplikace.

Klientský počítač:

- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\msmws002.dll"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\dialog.goblin.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\setup.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\update.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\publish.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\cgmlc\conftool.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\doktor.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\dialoghost.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\cgmassist\wkflbr32.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\cgmassist\wkflbu32.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\cgmassist\wkflsr32.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\cgmlc\vita-X.exe"
- "C:\Program Files (x86)\Dialog MIS\java\win32\bin\java.exe"

Server:

- C:\CGMSERVER\bin\core\cgm.servercore.exe
- C:\CGMSERVER\bin\brevir-1\cgm.brevir-1.exe
- C:\CGMSERVER\bin\ebooking-1\cgm.ebooking-1.exe
- C:\CGMSERVER\bin\ecommunication-1\cgm.ecommunication-1.exe
- C:\CGMSERVER\bin\medical-net\MedConnect\HCS.MedConnect.Service.exe
- C:\CGMSERVER\bin\medical-net\MedConnect.ServiceManager\HCS.MedConnect.ServiceManager.exe
- C:\CGMSERVER\bin\pgsql\bin\postgres.exe
- C:\CGMSERVER\jre\bin\java.exe

Server BIND pro localhost

- 12377 AMICUS server
- 12378 PCDOKTOR server
- 12379 postgres
- 12380 MEDNETWEB
- 12381 MEDNETAPI
- 12382 NGINX http
- 12384 JETTY.STOP
- 12385 CORE
- 12394 BREVIR-1
- 12395 EBOOKING-1
- 12399 ECOMMUNICATION-1

Server BIND pro 0:0:0

- 12343 NGINX https

URL

- http://__server__:12343/*
- http://www.dialogmis.cz/*.*
- http://filesrv.compugroup.cz/*.*

eDávky

- https://prod.b2b.vzp.cz/B2BProxy/HttpProxy/
- https://portal.vozp.cz/kom_brana.phtml
- https://portal.cpzp.cz/kom_brana.phtml
- https://portal.ozp.cz/kom_brana.phtml
- https://portal.zpskoda.cz/kom_brana.phtml
- https://eforms.zpmvcr.cz:8443/DavkyServer/DavkyServer
- https://portal.rbp-zp.cz/kom_brana.phtml

eKontrol (b2b)

- https://prod.b2b.vzp.cz/B2BProxy/HttpProxy/stavPojisteniB2B
- https://prod.b2b.vzp.cz/B2BProxy/HttpProxy/InfoRegPojKeKapitaciB2B
- https://prod.b2b.vzp.cz/B2BProxy/HttpProxy/stavSmlouvyICPICPPB2B
- http://cz.cgmlife.com

Služba eServices

cz.cgmlife.com

B2B servery VZP (pro eDávky a eKontrol)

- 193.228.234.40:443
- 193.228.234.168:443

MEDICAL NET

ldap.a-trust.at 84.242.9.223 Port: 389
crl.a-trust.at 84.242.9.202 Port: 80
ocsp.a-trust.at 84.242.9.201 Port: 80
212.124.150.39 Porty: 80, 443, 25, 110, 465, 995

eRecept (SÚKL)

- https://lekar-soap.test-erecept.sukl.cz/cuer/Lekar testovací rozhraní 46.30.94.135
- https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar ostré rozhraní 46.30.94.7

eNeschopenka (ČSSZ)

Reinstalace programu

- ws.cssz.cz [91.195.106.129, 91.195.107.129] pro produkční prostředí
- t-ws.cssz.cz [91.195.106.137, 91.195.107.137] pro testovací prostředí

ISIN

- <https://api.uzis.cz>
- Port 443

Všechny moduly používající elektronický podpis

Přístup k revokačním listům (Certificate Revocation List) používaných certifikačních autorit

Postsignum

- CRL kořenové certifikační autority:
 - <http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca.crl>
 - <http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2.crl>
- CRL podřízené certifikační autority QCA:
 - <http://www.postsignum.cz/crl/psqualifiedca.crl>
 - <http://www.postsignum.cz/crl/psqualifiedca2.crl>
- CRL podřízené certifikační autority VCA:
 - <http://www.postsignum.cz/crl/pspublicca.crl>
 - <http://www.postsignum.cz/crl/pspublicca2.crl>

ICA

- http://s.ica.cz/cgi-bin/crl_spub09.cgi
- http://q.ica.cz/cgi-bin/crl_qpub09.cgi

eidentity

- <http://www.aceid.cz/root2/crl/actual.crl>
- <http://www.aceid.cz/aca2/crl/actual.crl>

Složky


- \\<jmeno serveru>\Upgrade\ - dostupné klientským stanicím pro centrální aktualizaci

7) Přenesení certifikátu na nový počítač

V případě, že používáte **eRecept** či modul **eDávky**, **eParafa**, **eKontrol**, **eNeschopenka** nebo **eTržby** je nutné provést export certifikátu z Internet Exploreru. Pro export certifikátu postupujte následovně:



Spustíte **Internet**

Explorer >  > v menu zvolte **Možnosti Internetu** > **/Obsah/** > **Certifikáty** > **/Osobní/**

zde vyberete platný certifikát a pokračujte kliknutím [**Exportovat**]. V okně Průvodce exportu certifikátu pokračujte tlačítkem [**Další**] > a následně zvolte možnost **Ano**, exportovat privátní klíč v dalším kroku průvodci vyberete místo kam se uloží tento certifikát.

Pozor! Pokud není možné exportovat privátní klíč, je nutné problém konzultovat s Vaší certifikační autoritou nebo zažádat o vydání nového certifikátu. V tomto případě je třeba nechat certifikát napárovat ve zdravotních pojišťovnách.

Po nainstalování nového PC je třeba vytvořený soubor nainportovat. Stačí na něj jednoduše poklepat a potvrdit import.

8) O příručce

Datum vytvoření: 18.08.2021

Poznámka: Své dotazy či připomínky můžete odeslat prostřednictvím webu www.cgmsvet.cz nebo e-mailem na adresu servis@pcdoktor.cz nebo servis@pcdent.cz. Budeme rádi, pokud nám pomůžete příručku svými podněty dále vylepšovat a rozšiřovat.

Pro aktuální informace také doporučujeme navštívit naše webové stránky www.cgmsvet.cz, kde naleznete velké množství návodů, aktuální legislativní změny, instruktážní videa a další zajímavosti.

